



NDI Passive Spheres™




Til brug som tilbehør til hjælp ved auto-registrering og lokalisering under computerstøttet terapi.

Steriliser ikke igen. Gensterilisering har højst sandsynligt ingen effekt og kan påvirke nøjagtigheden.

Må ikke benyttes, hvis den sterile emballage er beskadiget.

1. Placér kuglen på monteringsstanderen og tryk ned, indtil den går i hak. (A)
2. Hvis den reflekterende overflade beskadiges eller tilstoppes med fremmedstoffer, skal kuglen skiftes ud før brug.
3. Skift ikke kuglen ud, mens værktøjet er i patientens krop.
4. Tag fat nederst og træk opad for at fjerne kuglen. (B)

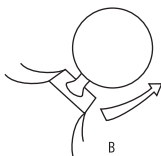

Northern Digital Inc.
103 Randall Drive
Waterloo, ON, Canada
N2V 1C5

STERILE EO



CE
2797

CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 93/42/EWG
CE-marked according to directive 93/42/EEC
Marquage CE conforme à la directive 93/42/CEE
Identificación CE en conformidad con la directriz 93/42/CEE
Marchio CE conforme alla direttiva 93/42/CEE

EC REP NDI Europe GmbH

Güttinger Str. 37, 78315 Radolfzell, Germany
Toll Free + 800 634 634 00