



NDI Passive Spheres™



FR

Pour utilisation comme accessoire pour faciliter l'auto-enregistrement et la localisation lors d'une opération assistée par ordinateur.

Ne pas restériliser. La restérilisation peut ne pas être efficace et affecter la précision.

Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé.

1. Positionner la sphère sur le montant puis pousser vers le bas jusqu'à l'obtention d'un bruit sec. (A)
2. Si la surface réfléchissante est endommagée ou obstruée par un corps étranger, remplacer la sphère avant utilisation.
3. Ne pas remplacer la sphère pendant que l'outil est à l'intérieur du corps du patient.
4. Pour enlever la sphère, saisir la base puis soulever. (B)

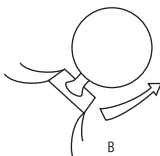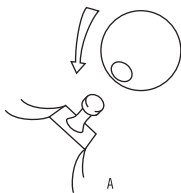

Northern Digital Inc.  
103 Randall Drive  
Waterloo, ON, Canada  
N2V 1C5

STERILE EO



CE  
2797

CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 93/42/EWG  
CE-marked according to directive 93/42/EEC  
Marquage CE conforme à la directive 93/42/CEE  
Identificación CE en conformidad con la directriz 93/42/CEE  
Marchio CE conforme alla direttiva 93/42/CEE

EC REP NDI Europe GmbH

Güttinger Str. 37, 78315 Radolfzell, Germany  
Toll Free + 800 634 634 00