



NDI Passive Spheres™




Voor gebruik als accessoire bij zelfregistratie en lokalisering tijdens computerondersteunde therapie.

Steriliseer niet opnieuw. Opnieuw steriliseren is eventueel niet efficiënt en kan de nauwkeurigheid aantasten.

Niet gebruiken indien de steriele verpakking beschadigd is.

1. Plaats de bol op de drager en druk erop neer totdat u een klik hoort. (A)
2. Indien het reflecterende oppervlak met vreemd materiaal is beschadigd of geoccludeerd, moet de bol vóór gebruik worden vervangen.
3. Vervang de bol niet terwijl het instrument zich in het lichaam van de patiënt bevindt.
4. Grijp een bol die dient te worden verwijderd, bij de onderzijde vast en trek hem naar boven. (B)

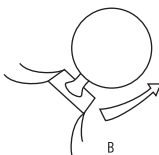

Northern Digital Inc.
103 Randall Drive
Waterloo, ON, Canada
N2V 1C5

STERILE EO



CE
2797

CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 93/42/EWG
CE-marked according to directive 93/42/EEC
Marquage CE conforme à la directive 93/42/CEE
Identificación CE en conformidad con la directriz 93/42/CEE
Marchio CE conforme alla direttiva 93/42/CEE

EC REP NDI Europe GmbH

Güttinger Str. 37, 78315 Radolfzell, Germany
Toll Free + 800 634 634 00